

# Mannheimer

REHA

NORM

## Dusch-Toilettensitzschalenstuhl (MTS)

Hilfsmittelnummer: 33.40.04.1013

Der Mannheimer Dusch-Toilettensitzschalenstuhl gibt sicheren Halt und besten Sitzkomfort. Die Spreizhaltung der Oberschenkel, die für den Toilettenaufenthalt so typisch ist, wird durch die Schalenform gefördert. Das Vorrutschen verhindert ein Sicherheitsbügel, an dem auch ein Beckenbügel montiert werden kann, so dass ein sanfter Druck auf den Unterbauch entsteht speziell dann, wenn der Benutzer sich nach vorne beugt. Darüber hinaus kann mit Hilfe der Neigungsverstellung eine Neigung nach hinten erzeugt werden. All dies macht den Sitzschalenstuhl zu einem erfolgreichen Hilfsmittel beim Toiletentraining.

Die anatomische Form der Ortho-Dynamik-Sitzschale ermöglicht beschwerdefreies Sitzen auch über längere Zeit. Der Komfort kann noch erhöht werden, wenn der Sitz mit Polstern ausgestattet wird. Für Patienten, die einen Sitz nach Körperabdruck benötigen, kann zum Beispiel eine Einfräsung aus geschlossenporigem Schaumstoff eingesetzt werden. Durch vier Rollen lässt sich der Sitzschalenstuhl mühelos über jedes Toilettenbecken schieben. Die Ausstattung mit einem Toiletteneimer ist ebenfalls möglich. Die Metallteile sind komplett aus Aluminium und Edelstahl und die Polster aus nassfestem Schaumstoff gefertigt. Somit ist der Sitzschalenstuhl auch als Duschstuhl nutzbar.



Daten:						
Größe	2	3	4	5	6	7
Gewicht ab	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg
Breite insg. cm	43	48	53	58	63	63
Länge insg. cm	65	65	65	70	70	70
Sitzbreite hinten cm	24	28	34	38	43	43
Sitzbreite vorne cm	33	39	45	53	58	60
Weite zwischen Armlehnen cm	45	50	55	60	65	65
Sitzhöhe min. cm	48	48	48	48	48	48
Sitzhöhe max. cm	55	55	55	55	55	55
Sitztiefe cm	24	30	36	38	40	52
Rückenhöhe cm	37	46	53	60	62	77
Toilettenausschnitt <sup>(1)</sup> cm	12x17	14x20	16x23	18x26	20x29	20x29
Kantelung nach vorn in Grad	0	0	0	0	0	0
Kantelung nach hinten in Grad	37°	37°	37°	37°	37°	37°

<sup>(1)</sup> individuelle Anpassung möglich

Stand 01/2024

## Grundaustattung:

- Sitzschale aus verstärktem Kunststoff
- Neigungsverstellbar (ab Größe 3 mit Gasfeder)
- Höhenverstellbar
- Fahrbar auf feststellbaren Rollen, ø Größe 2 und 3: 75 mm, ø Größe 4-7: 100 mm
- Schiebegriff für Begleitperson
- Kopfstützenhalterung
- Maximalbelastung: 120 kg

## Zubehör:

- Kopfstütze Muschelform
- Kopfstütze Seitenführung
- Kopfstütze nach Maß
- Sicherheitsbügel gepolstert
- Beckenretraktionsbügel
- Beckengurt
- Armlehnenpolster höhen- und tiefenverstellbar
- Abduktionskeil, abnehmbar als Spritzschutz
- Fußbank, höhenverstellbar
- Ausschnittsverkleinerer aus geschossenporigem Schaumstoff
- Sitz- und Rückenpolster, klettbar (Aquastoff oder Neopren)
- Toiletteneinrichtung

## Farben:

Sitzschale RAL 9010 reinweiß (Standard)  
andere Farben auf Anfrage  
Untergestell RAL 9006

Den MTS gibt es auch als reinen Toilettenaufsatz ohne Untergestell. Er kann mit fast jedem Zubehör ausgestattet werden.

## Ausstattungsöglichkeiten:



Kopfstütze, Schiebegriff und Handauslöser für Neigungsverstellung




Sicherheitsbügel, Sitz- und Rückenpolster



Ausschnittsverkleinerer und Rückenpolster mit Seitenführung aus geschlossenporigem Schaumstoff



Toiletteneinrichtung

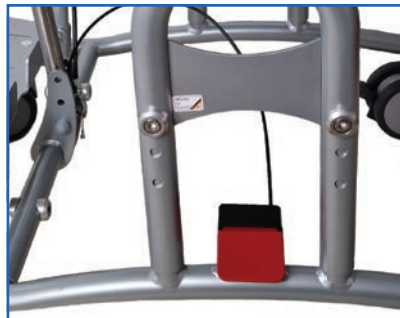

Fußauslöser für Neigungsverstellung



Fußbank, höhenverstellbar und hochklappbar



MTS gekantelt



Abduktionskeil steckbar als integrierter Spritzschutz